



Campaña Estudiantes

We invest in you.





ÍNDICE:

Estuche TOKIO **1**
Z990L | 44W de Potencia

Estuche KIOTO **2**
M900L | 26W de Potencia

Estuche OSAKA **3**
Pana-Max2 M4 | 20W de Potencia


**Mantenimiento
y Certificado de Garantía**

DualDefence®

Sistema de Prevención Contra la Contaminación Cruzada de NSK

El instrumental rotatorio de NSK está diseñado con una doble protección contra la contaminación cruzada:

Clean Head System (Sistema de Cabezal Limpio) previene la absorción de fluidos dentro del cabezal y la manguera. La **Válvula Anti-Retorno** previene la contaminación del suministro de agua.

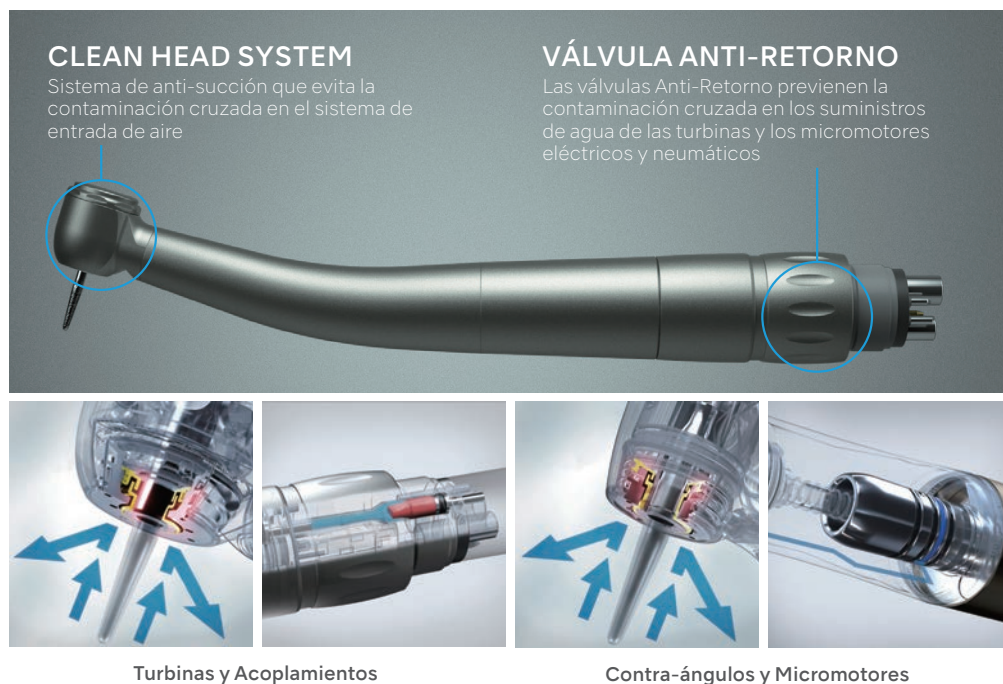

Todas las piezas de mano de NSK están equipadas con el **Clean Head System** (Sistema de Cabezal Limpio) que previene la absorción de fluidos.

Todos los acoplamientos y micromotores incluyen **Sistemas Anti-retorno**.



La eficacia del Sistema Dual Defense ha sido probada y validada por universidades de prestigio, como la Universidad de Washington, la universidad de Umeå en Suecia y la Universidad Nacional de Singapur.





Potencia sin precedentes

Nueva Turbina Neumática Ti-Max Z z990L
Potencia 44W

1 Estuche TOKIO

Z990L | 44W de Potencia



Z990L

TURBINA DE TITANIO
CON LUZ



- Clean Head System (Sistema de Cabezal Limpio)
- Cuerpo de titanio macizo con revestimiento DURAGRIP®
- Velocidad: 360.000 min⁻¹
- Potencia: 44W
- Cuatro sprays
- Fácil mantenimiento [cambio del grupo rotor por el propio usuario]



X25

CONTRA-ÁNGULO
DE TITANIO

- Clean Head System (Sistema de Cabezal Limpio)
- Cuerpo de titanio macizo
- Velocidad directa 1:1
- Velocidad máxima: 40.000 min⁻¹
- Spray simple



PTL-CL-LED

ACOPLAMIENTO

- Válvula Anti-Retorno
- LED incorporado en el propio acoplamiento
- Cuerpo de titanio macizo



S-Max M205

MICROMOTOR
NEUMÁTICO

- Válvula Anti-Retorno
- El Más Pequeño y Ligero del Mundo
- Velocidad máxima: 25.000 min⁻¹
- Giro derecha/izquierda
- Spray de agua interno



X65

PIEZA DE MANO RECTA

- Clean Head System (Sistema de Cabezal Limpio)
- Cuerpo de titanio macizo
- Velocidad directa 1:1
- Velocidad: 40.000 min⁻¹
- Spray simple
- Para fresas HP/CA





Maximum Power

26W High Power
Facilitate more intricate operations



S-Max M
Air Turbine

2 Estuche KIOTO

M900L | 26W de Potencia



M900L

TURBINA DE ACERO INOXIDABLE CON LUZ

LED

- Clean Head System (Sistema de Cabezal Limpio)
- Cuerpo de acero inoxidable
- Velocidad: 430.000 min⁻¹
- Cuatro sprays
- Bajo nivel de ruido: 56 dBA
- Fácil mantenimiento [cambio del grupo rotor por el propio usuario]



X25

CONTRA-ÁNGULO DE TITANIO

- Clean Head System (Sistema de Cabezal Limpio)
- Cuerpo de titanio macizo
- Velocidad directa 1:1
- Velocidad máxima: 40.000 min⁻¹
- Spray simple



PTL-CL-LED

ACOPLAMIENTO

- Válvula Anti-Retorno
- LED incorporado en el propio acoplamiento
- Cuerpo de titanio macizo



S-Max M205

MICROMOTOR NEUMÁTICO

- Válvula Anti-Retorno
- El Más Pequeño y Ligero del Mundo
- Velocidad máxima: 25.000 min⁻¹
- Giro derecha/izquierda
- Spray de agua interno



X65

PIEZA DE MANO RECTA

- Clean Head System (Sistema de Cabezal Limpio)
- Cuerpo de titanio macizo
- Velocidad directa 1:1
- Velocidad: 40.000 min⁻¹
- Spray simple
- Para fresas HP/CA





Reasonable Performance

Powerful 20W
DualDefence : Proprietary Infection Control

DualDefence : Proprietary Infection Control



Air Turbine



Pana-Max2 M4

TURBINA DE ACERO INOXIDABLE SIN LUZ

- Clean Head System (Sistema de Cabezal Limpio)
- Válvula Anti-Retorno
- Cuerpo de acero inoxidable
- Velocidad: 450.000 min⁻¹
- Spray simple
- Bajo nivel de ruido : 56 dBA
- Fácil mantenimiento [cambio del grupo rotor por el propio usuario]
- Midwest de 4 vías



X25

CONTRA-ÁNGULO DE TITANIO

- Clean Head System (Sistema de Cabezal Limpio)
- Cuerpo de titanio macizo
- Velocidad directa 1:1
- Velocidad máxima: 40.000 min⁻¹
- Spray simple



X65

PIEZA DE MANO RECTA

- Clean Head System (Sistema de Cabezal Limpio)
- Cuerpo de titanio macizo
- Velocidad directa 1:1
- Velocidad: 40.000 min⁻¹
- Spray simple
- Para fresas HP/CA



S-Max M205

MICROMOTOR NEUMÁTICO

- Válvula Anti-Retorno
- El Más Pequeño y Ligero del Mundo
- Velocidad máxima: 25.000 min⁻¹
- Giro derecha/izquierda
- Spray de agua interno

Mantenimiento

NSK recomienda limpiar y lubricar las piezas de mano después de cada intervención y antes de su esterilización



PREPARACIÓN

Desconecte la turbina del acoplamiento (o el contra-ángulo del micromotor) y retire la fresa.



LIMPIEZA

Limpe la superficie externa de la pieza de mano con agua corriente.



DESINFECCIÓN

Limpe la superficie externa de la pieza de mano cuidadosamente con un desinfectante de instrumental.



LUBRIFICACIÓN

Lubrique la pieza de mano utilizando PANA SPRAY Plus de NSK. Agite el bote de spray. Pulse hasta que el aceite salga completamente limpio por el cabezal.



ESTERILIZACIÓN

Coloque la pieza de mano en la bolsa para esterilización. Todas las piezas de mano NSK son esterilizables en autoclave hasta un máximo de 135°C.



CONSERVACIÓN

Después del ciclo de esterilización retire inmediatamente la pieza de mano del autoclave.

Estuche + PANA SPRAY Plus

CON LA COMPRA DE UN ESTUCHE

- 1 Maletín para los instrumentos
- 1 PANA SPRAY Plus
- 1 Punta de Lubricación



Certificados CE, ISO y Justificante de Comercialización

	
EC Certificate Directive 93/42/EEC Annex II, excluding Section 4 Full Quality Assurance System Medical Devices	
Registration No.: HD 60148508 0001 Report No.: 12031343 009 Manufacturer: Nishikawa Inc. 700 Shinmatsuda, Kamata, Toshigi 322-0596 Japan Products: Intravenous and Nerveless in Medical and Hospital Field (see attachments for products included) Registration Approval: Registration No. HD 60148507 0001	

[illegible][illegible]

REGISTRO SANITARIO
ESPAÑOL



hasta la finalización de los estudios.



de los instrumentos al finalizar la carrera.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL NSK DENTAL SPAIN



VELOCIDAD



PROFESIONALIDAD



FIABILIDAD



SEGURIDAD



Escanee el código QR
para más información

Tel: +34 91 626 61 28

E-mail: sat@nsk-spain.es

Dirección: C/ Rozabella, 8. Europa Empresarial

Edif. Roma | Planta baja, Oficina A - 28290 - Las Rozas, España

RED COMERCIAL DE NSK DENTAL SPAIN



spain.promotion.nsk-dental.com/campana-estudiantes

María Jesús Suárez

Responsable de Grandes Cuentas

✉ suarez@nsk-spain.es
☎ +34 636 79 64 64

Miguel González

País Vasco, Asturias, Burgos, Cantabria,
La Rioja y Navarra

✉ miguelgonzalez@nsk-spain.es
☎ +34 627 75 92 21

Óscar Llorente

Comunidad Valenciana, Albacete,
Islas Baleares, Murcia y Teruel

✉ llorente@nsk-spain.es
☎ +34 678 72 50 03

Ana González

Madrid, Ávila, Cuenca, Guadalajara,
Salamanca, Segovia, Toledo y Valladolid

✉ anagonzalez@nsk-spain.es
☎ +34 603 64 78 06

Xavier Sentís

Cataluña, Huesca y Zaragoza

✉ sentis@nsk-spain.es
☎ +34 650 29 11 46

Gloria Gibbah

Sevilla, Cádiz, Córdoba, Extremadura
y Huelva

✉ gibbah@nsk-spain.es
☎ +34 627 75 93 50

Fco. Javier Portela

Galicia, León, Palencia y Zamora

✉ portela@nsk-spain.es
☎ +34 645 42 69 12

Leonardo Pascual

Málaga, Almería, Ciudad Real,
Granada, Jaén, Ceuta y Melilla

✉ pascual@nsk-spain.es
☎ +34 678 72 50 32

João Paulo Costa

Portugal

✉ costa@nsk-spain.es
☎ +351 915 66 32 32

MANTÉNGASE INFORMADO, MANTÉNGASE CONECTADO.
ENCUENTRANOS EN:



¡Apúntate a la
newsletter de
NSK Dental Spain!



@nskdentalspain



@nsk-dental-spain



@NSKDentalSpain

NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

C/ Rozabella, 8. Europa Empresarial - Edificio Roma | Planta baja, Oficina A - 28290 - Las Rozas de Madrid, España

tel: +34 91 626 61 28 · +34 91 626 61 32 | e-mail: info@nsk-spain.es